



GRIFFIN MEDICAL ALARM

výhradní zastoupení TUNSTALL

TROJNÁSOBNÝ DRŽITEL CENY

GRAND PRIX

NA VELETRHU FOR SENIOR v Praze
ZA ROKY 2008 , 2009 A 2010



2008



2009



2010



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetíněves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

Griffin Medical Alarm je službou tísňové péče, která pomocí zařízení s tísňovým tlačítkem snižuje zdravotní a bezpečnostní rizika:

- seniorů
- osob žijících osaměle
- fyzicky handicapovaných osob
- ostatních, kteří potřebují bezpečí



o společnosti

Česká bezpečnostní firma od roku 1993

Společnost GRIFFIN se sídlem v Praze působí na trhu již od roku 1993. Předmětem činnosti je poskytování komplexních služeb v oblasti komerční bezpečnosti. Bezpečnostní firmu v roce 1993 na českém trhu zavedla obchodní společnost Griffin, spol. s r.o. Na podzim roku 1997 byla založena nová společnost Griffin, a.s. Důvodem založení této nové společnosti byly požadavky klientů, snížení podnikatelských rizik a možnost lepší dostupnosti vnějšího kapitálu. v současné době obě organizace pracují paralelně a vzájemně se doplňují. Od roku 2006 rozšířila svoji činnost o projekty domácí tísňové péče pro seniory a projekty technického zajištění domů pro seniory. Tuto činnost provozuje společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM sro. Po pečlivém výběru dodavatele elektronických systémů tísňové péče společnost Griffin, a.s. navázala spolupráci s anglickou firmou Tunstall GmbH, V současné době se společnost GRIFFIN MEDICAL ALARM transformuje na „obecně prospěšnou společnost „ pro možnost žádat o dotace z EU z důvodu vysoké finanční náročnosti projektu „domácí tísňové péče“

Základní poslání společnosti GRIFFIN MEDICAL ALARM lze rozdělit do dvou základních kategorií

A. KATEGORIE SLUŽEB PRO JEDNOTLIVCE

motto

„ zkvalitnit a prodloužit život seniorů v jejich přirozeném domácím prostředí při zajištění jejich bezpečnosti a pocitu z tohoto faktu „



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

B. KATEGORIE SLUŽEB PRO ORGANIZACE

v kategorii A služeb pro jednotlivce se jedná o tyto poskytované služby

1. DOMÁCÍ TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ

Provozování celostátní služby pro nejen seniory ale i ostatní potřebné spoluobčany. Tuto službu jsme nyní rozšířili o poskytování pomoci také v prostorech mimo domov pomocí **GPS TRACKERU**, k tomuto systému nabízíme také **KLÍČOVOU SLUŽBU**

2. VYHLEDÁVÁNÍ ZATOULANÝCH A ZTRACENÝCH ZVÍŘAT A POHYBUJÍCÍCH SE PŘEDMĚTŮ

služba se provozuje pomocí GPS trackeru, jedná se o zařízení s funkcemi mobilního telefonu a zabudovaným GPS přijímačem. Toto zařízení bylo vyvinuto pro sledování a ochranu lidí, nákladu a objektů. GPS přijímač určuje aktuální polohu zařízení a odesílá data příslušné osobě nebo na operační centrálu



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

v kategorii B služeb pro organizace se jedná o tyto poskytované služby

3. STUDIE A PROJEKTOVÁNÍ

systémů ochrany zdraví a majetku, signalizačních a komunikačních systémů pro zdravotnictví i průmysl

- Komunikační systémy pro domovy pro seniory a jiné ústavy sociální péče
- Poplachové, nouzové a tísňové systémy pro domovy pro seniory a jiné ústavy sociální péče
- Zabezpečovací a protipožární systémy pro domovy pro seniory a jiné ústavy sociální péče
- Aktivní účast v celostátním projektu Ministerstva vnitra „Bezpečná lokalita –bezpečné bydlení „

4. MONTÁŽE PROJEKTOVANÝCH SYSTÉMŮ VČETNĚ JEJICH ZÁRUČNÍHO A POZÁRUČNÍHO SERVISU

5. POŘÁDÁNÍ SEMINÁŘŮ, BESED A ŠKOLENÍ

tyto akce jsou pořádány pro seniory v různých společenských organizacích na téma bezpečnost v běžném životě , za spolupráce s ministerstvem vnitra , městských úřadů a městské a státní policie

6. PRODEJ POMŮCEK PRO A SENIORY

- Pomůcky hygienické
- Pomůcky elektronické (telefony a jiné pomůcky pro seniory

Jak systém funguje:

Základem jde o systém **DOMÁCÍHO TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ** proto může být zařízení používáno v domě či bytě nebo bezprostředním okolí klienta, v současné době je tato služba rozšířena o možnost tísňového volání i mimo domov a to pomocí **GPS TRACKERU**

- Základem **DOMÁCÍHO TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ** je zařízení označené jako **PIPERFON CONNECT**, které má klient u sebe doma, v bytě, či domě, se může kdykoliv v případě nouze spojit pomocí nouzového tlačítka **PIPER AMIE** s operátorkami, které zařídí vše potřebné pro jeho pomoc. Spojení a datový přenos mezi



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhříně

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz



PIPERFON CONNECTEM a s operátorem v řídicím centru je zajištěn pomocí pevné telefonní linky. Pokud klient pevnou telefonní linku nevládní je možné tento přenos realizovat pomocí GSM linky, to však vyžaduje další technické zařízení a to buď GSM TELEFON GDP 04 nebo GSM bránu. GSM TELEFON je výhodnější, protože je ho možné používat k běžnému telefonování, kdežto GSM BRÁNA je pouze jednoúčelová.

- K PIPERFONU CONNECT je bezdrátově připojeno nouzové tlačítko PIPER AMIE, které má klient u sebe, nejlépe na ruce nebo na krku a jehož pomocí při aktivaci červeného tlačítka se taktivuje PIPERFON CONNECT jehož pomocí se klient v případě potřeby spojí s operátorem.
- Velice citlivý mikrofon a reproduktor v zařízení zaručí, že se klient s operátorkami uslyší, aniž by musel být přímo fyzicky u přístroje PIPERFON CONNECT v momentě kdy s nimi mluví.
- Celý systém funguje jako stavebnice, k jehož základní jednotce PIPERFON CONNECT lze jednoduchým způsobem přiřadit jednotlivé doplňkové komponenty, které Vás pomohou ochránit.
- Základním komponentem je vodotěsné nouzové tlačítko PIPER AMIE, které se dodává ke každé základní jednotce PIPERFON CONNECT
- Mezi další a nejžádanější komponent, který lze bezdrátově připojit patří PÁDOVÝ DETEKTOR(tento vyhrál hlavní cenu Grand Prix na veletrhu FOR SENIOR v roce 2008 v Praze jako nejlepší a nejužitečnější výrobek).
- PÁDOVÝ DETEKTOR Vám zajistí ochranu i v případě, že sami nemůžete stisknutím nouzového tlačítka si přivolat pomoc (např. při pádu a následném bezvědomí osoby která pádový detektor používá, vyvolá tento sám o sobě poplach a spojí se s dispečinkem, který zajistí odbornou pomoc i v případě, že hlídaná osoba z jakýchkoliv důvodů nekomunikuje
- Z dalších komponentů můžeme jmenovat ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR, KOUŘOVÝ DETEKTOR, DETEKTOR



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Háje
Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783
www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

KONTROLY PŘÍTOMNOSTI HLÍDANÉ OSOBY, VANOVÉ TÁHLO, DÁVKOVAČ LÉKŮ, DETEKTOR EPILEPTICKÝCH ZACHVATŮ atd

- Centrální dispečink, který slouží pro celou republiku jsou operátoři vybaveni kromě jiného speciálním centrálním pultem CMS 4000 a softwarem PCN 1 od společnosti Tunstall. Operátorkám se na obrazovce monitoru zobrazí veškeré potřebné informace o klientovi, jako je jméno, adresa, popis objektu v němž se klient nachází, jak se k němu co nejlépe dostat, zařízení z něhož tísňové volání přichází a další informace například o zdravotním stavu, které je klient ochoten nám sdělit. Zde jsou také uloženy v zapečetěných obálkách kódy k jednotlivým tresorům, které slouží na uložení rezervních klíčů u dveří klienta. V případě potřeby jsou tyto kódy a ostatní informace poskytnuty záchranným složkám a tím se urychlí případná pomoc.
- Při používání služby lokalizace pomocí GPS TRACKERU, musí u sebe klient nosit zařízení ve velikosti poloviny mobilního telefonu které také jako mobilní telefon vypadá a funguje a navíc má zabudovaný GPS přijímač, který v zadaných intervalech zaznamenává vaši polohu pomocí zeměpisných souřadnic.
- V případě nouze aktivujete zmáčknutím červeného tlačítka alarm na GPS TRACKERU a můžete hovořit pomocí zařízení s operátorem, kterému sdělíte Váš problém. Současně přijde na centrální dispečink SMS zpráva na které jsou zobrazeny zeměpisné souřadnice na kterých se nacházíte a operátorovi se na mapě zobrazí místo kde se nacházíte a může na toto místo vyslat patřičnou pomoc.
- Zařízení na lokalizaci GPS TRACKER se může používat také jako plnohodnotný mobilní telefon, který se v případě nouze stane záchranným zařízením

Pomocí obou služeb Griffin Medical Alarmu, chceme

- docílit snížení následků nějaké nehody, která se přihodí přímo ve vašem bytě nebo domě, nebo ve volné přírodě při cestování, výletu či běžném pobytu mimo domov



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117, fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz, email.: info@medicalalarm.cz

- zajištění maximální možné délky života ve vysokém věku v domácím prostředí
- pomoci seniorům a zdravotně postiženým lidem udržet si svoji nezávislost a pocit bezpečnosti.
- Pomocí GPS TRACKERU umožňuje nalezení ztracených zvířat a odcizených věcí , které jsou vybaveny GPS TRACKEREM

Jak službu používat

- *V domácím prostředí*
Jednoduše stisknete nouzové tlačítko PIPER AMIE, které můžete nosit volně nebo na ruce, či jako přívěšek. Jakmile stisknete nouzové tlačítko, okamžitě zaktivujete ústřednu PIPERFON CONNECT. V případě, že máte PÁDOVÝ DETEKTOR a dojde u Vás k pádu či ztrátě vědomí bude tento detektor aktivován automaticky v tom momentě, jste spojeni přes ústřednu PIPERFON CONNECT s centrálou. Naši speciálně školení operátoři mají v tu chvíli umožněno s Vámi mluvit přes mikrofon v ústředně. PIPERFON CONNECT (aniž byste museli být přímo u ní). Operátorky zajistí situaci a vy dostane potřebnou pomoc co nejdříve. V případě, že nedojde z jakéhokoli důvodu k hlasové komunikaci mezi operátorem a volající osobou je standardním postupem volání rychlé záchranné služby do místa tísňového volání.
- *Ve venkovním prostředí*
Při pocitu nutnosti volat o pomoc, jednoduše aktivujete pomocí červeného tlačítka funkci ALARM na GPS TRACKERU, sdělit operátorovi problém který se vyskytl a vyčkat pomoci

Pořízení služby Griffin Medical Alarmu

Nejžádanější způsob zavedení služby „Domácího tísňového volání,“ je pronájem zařízení bez jakékoliv počáteční investice.

Průběh pořízení služby

- Po telefonické dohodě o termínu a rozsahu služby se k Vám dostaví zástupce a technik naší společnosti
- Během 15-20 minut vyplníte společně dotazník, kartu klienta a smlouvu o poskytování služby a mezitím technik nainstaluje zařízení a seznámí Vás s jeho obsluhou a



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetíněves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

provede testovací tísňové volání, popřípadě nainstaluje tresor na náhradní klíče pro možnost zajištění **KLÍČOVÉ SLUŽBY**

- Každý klient podepisuje **PLNOU MOC** kterou zplnomocňuje společnost **GRIFFIN MEDICAL ALARM** možnosti přivolání záchranných složek jménem klienta
- Poté naši pracovníci odjedou
- Po zadání Vašich údajů do centrálního počítače Vám dispečer telefonicky oznámí zprovoznění služby.
- Do 24 -48 hodin po telefonickém potvrzení objednávky a podle místa instalace máte službu „ Domácího tísňového volání „ zprovozněnou
- Služba centrálního dispečinku obsahuje tento základní „ žlutý program „s těmito úkony

Nepřetržitý 24h dohled nad senior alarmem

Udržování a pravidelná aktualizace údajů o liovni

Přijetí nouzového signálu


Hlasová komunikace s hlídanou osobou

Zajištění záchranné služby či zajišťujících osob

Kontaktování osob určených klientem

- Pokud budete mít zájem o rozšíření služeb může být tato poskytnuta na základě individuální dohody. Všechny možné programy mohou být individuálně upraveny a přizpůsobeny dle potřeb klientů.

Možnost využití systému pro ochranu celého domu

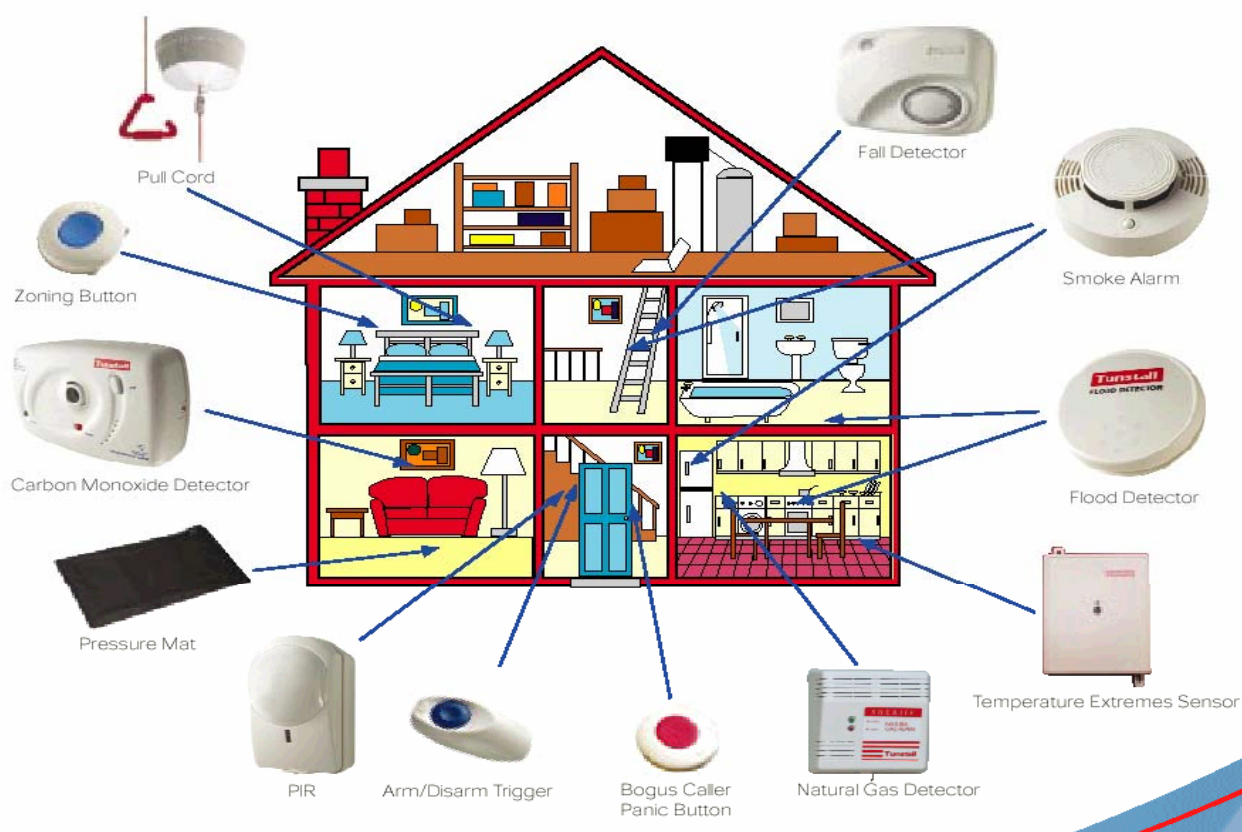

ŽLUTÝ PROGRAM	ZELENÝ PROGRAM	MODRÝ PROGRAM
Nepřetržitý 24h dohled nad senior alarmem	Nepřetržitý 24h dohled nad senior alarmem	Nepřetržitý 24h dohled nad senior alarmem
Udržování a pravidelná aktualizace údajů o klientovi	Udržování a pravidelná aktualizace údajů o klientovi	Udržování a pravidelná aktualizace údajů o klientovi
Přijetí nouzového signálu	Přijetí nouzového signálu	Přijetí nouzového signálu
Hlasová komunikace s hlídanou osobou	Hlasová komunikace s hlídanou osobou	Hlasová komunikace s hlídanou osobou
Zajištění záchranné služby či zajišťujících osob	Zajištění záchranné služby či zajišťujících osob	Zajištění záchranné služby či zajišťujících osob
Kontaktování osob určených klientem	Kontaktování osob určených klientem	Kontaktování osob určených klientem
	Komunikace se záchrannou službou a ověření stavu osoby	Komunikace se záchrannou službou a ověření stavu osoby
	Kontaktování lékaře	Kontaktování lékaře
	Vypracování zprávy pro osoby určené klientem a lékaře určeného klientem	Vypracování zprávy pro osoby určené klientem a lékaře určeného klientem
	Uložení do elektronického archivu	Uložení do elektronického archivu
	Pravidelné volání 2x týdně	Pravidelné volání 7x týdně
		Aktivní spolupráce s určeným lékařem
		Upomínková služba (Připomenutí užití léku, návštěvy lékaře, výročí členů rodiny atd.)
		Zajištění místa pokud je klient odvezen k ošetření či do nemocnice podle předem dohodnutých instrukcí
		Klíčová služba
		Kamerová služba Griffin technologies. (K této službě je nutné nainstalovat kamerový systém jehož cena není uvedena v této nabídce.)



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetíněves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

Možnosti získání služby Griffin Medical Alarmu :

Financování je možné 3 způsoby:

- A. Pronájem zařízení
- B.. Jednorázový nákup zařízení
- C. Individuální řešení dle situace a potřeb klienta

ad A. Pronájem zařízení

lehká verze:

PIPERFON CONNECT s nouzovým tlačítkem PIPER AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze k PIPERFONU CONNECT připojit až 12 různých periferních zařízení. Při připojení pouze nouzového tlačítka s centrální jednotkou je měsíční poplatek za pronájem zařízení a službu centrálního dispečinku

480,-Kč měsíčně platí se po celou dobu pronájmu

těžká verze 1:

PIPERFON CONNECT s nouzovým tlačítkem PIPER AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze k PIPERFONU CONNECT připojit až 12 různých periferních zařízení. Cena za službu a připojení od závislá na druhu a počtu připojených periferních zařízeních.

480,-Kč + (**druh a počet připojených periférií viz tab. 1**)
měsíčně se platí po celou dobu pronájmu

těžká verze 2:

PIPERFON CONNECT + s nouzovým tlačítkem PIPER AMIE které je součástí dodávky, u této verze lze k PIPERFONU CONNECT + připojit až 35 různých periferních zařízení. Cena za službu a připojení od závislá na druhu a počtu připojených periferních zařízeních.

480,-Kč + (**druh a počet připojených periférií viz tab. 1**)
měsíčně se platí po celou dobu pronájmu



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz


GPS TRACKER

Služba GPS TRACKERU včetně pronájmu zařízení a úkonů se službou spojených

480,-Kč měsíčně platí se po celou dobu pronájmu

podmínky pronájmu:

- pronájem není časově limitován, v případě ukončení nájmu musí být zařízení funkční a nepoškozené, po té se demontuje a odveze, minimální doba pronájmu jsou tři měsíce
- instalace a připojení je zdarma : dopravu účtujeme symbolicky 6,- Kč / km
- pronájem zařízení a služba dispečinku se hradí vždy do 10 . dne měsíce dopředu bankovním převodem
- tresor na náhradní klíče pro klíčovou službu a cestovné se hradí hotově při instalaci a to za tresor 1500,- Kč

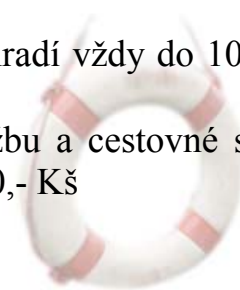

ad B Jednorázový odkup zařízení

Zařízení lze jednorázově koupit a měsíčně platit pouze měsíční paušál za připojení. V případě, že používáte pouze nouzové tlačítko **PIRER AMIE** je měsíční paušál za připojení na centrální dispečink **250,- Kč měsíčně**. V případě že máte připojeno více periferních zařízení je cena za základní službu **350,-Kč za žlutý program**. Ceny ostatních programů se liší dle zvolených služeb a jsou stanoveny individuálně



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

PRONÁJEM A PRODEJ JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ

Tabulka č.1

	PRODUKT včetně připojení na centrální dispečink	Pronájem v Kč měsíčně	Cena za prodej v Kč dotovaná	cena za prodej v Kč nedotovaná
1	PIPERFON CONNECT *	480	9 100	14 500
2	PIPERFON CONNECT + *	480	12 800	18 500
3	PIPER AMIE (GEM)	Je součástí balení	Je součástí sady	
4	PÁDOVÝ DETEKTOR	240	6 200	8 500
5	KOUŘOVÝ DETEKTOR	120	2 800	4 500
6	ZÁPLAVOVÝ DETEKTOR	120	5 400	6 900
7	POHYBOVÝ DETEKTOR	Je součástí tísňového setu	6 000	8 500
8	VANOVÉ TÁHLO	120	2 000	3 500
9	POSTELOVÁ PODLOŽKA	Individuálně dle typu	3 900	5 900
10	GSM BRÁNA	240	6 900	6 900
11	TÍSŇOVÝ SET	Individuálně dle rozsahu	25 900	30 000
12	GSM TELEFON- GDP 04	240	5 500	
13	DÁVKOVAČ LÉKŮ	240	15 000	18 500
14	EPILEPTICKÁ PODLOŽKA	320	25 000	30 000
15	GPS TRACKER	480	6 500	6 500

* každá sada obsahuje jedno nouzové tlačítko Piper Amie

**CENA DOTOVANÁ JE VÁZANÁ NA SLUŽBU CENTRÁLNÍHO
DISPEČINKU SPOLEČNOSTI GRIFFIN MEDICAL ALARM**



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

POPIS A VZHLED JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTŮ SLUŽBY GRIFFIN MEDICAL ALARM

PiperFon Connect



Základní řídicí jednotka která umožňuje připojení až 12 kusů periferního zařízení. Tato verze zařízení Vám umožní přivolat si stisknutím tlačítka pomoc prostřednictvím dispečinku GMA. Je možné prostřednictvím vestavěného mikrofону a reproduktoru hovořit s operátorkou GMA pracoviště. Tato Vám zajistí rychlou pomoc. Prostřednictvím tlačítka můžete také přijímat běžné hovory na pevné lince například z postele což je velmi dobré pro osoby se sníženou mobilitou.

PiperFon Connect +



Tato verze řídicí jednotky je nejdokonalejší a má možnost připojení až 35 různých periferních zařízení. Při této verzi můžete libovolně kombinovat jednotlivá periferní zařízení a to dle potřeby a požadavků klienta. Na displeji můžete sledovat průběh jednotlivých akcí a zařízení může sloužit také telefonní aparát

centrální pult CSM 4000



Toto zařízení je mozkiem celého systému „**DOMÁCÍ TÍSŇOVÉ PÉČE**“, je umístěno na centrálním dispečinku , kde jej obsluhují školení dispečeri, kteří přijímají vyhodnocují a vyřizují jednotlivé tísňové volání ze všech systémů, které společnost poskytuje. Dispečeri mají základní školení ze zdravotnictví, první pomoci a základy psychologie aby byli schopni poskytnou potřebnou pomoc volajícím. Tato školení se v pravidelných intervalech opakují a jsou rozšířena o nové poznatky v oboru.



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetíněves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

3 Pádový detektor

Výrobek oceněný první cenou v soutěži
GRAND PRIX 2008 na veletrhu
FOR SENIOR v Praze



Detektor pádu je zařízení které je tak malé a lehké, že jej můžete nosit bez povšimnutí. Toto baterii napájené zařízení obsahuje mikroprocesor a vysílač. Detektor pádu spolehlivě odhalí pád toho kdo jej nosí a spojí jej ihned se s ústřednou. Pokud se pozice detektoru nezmění během následujících 15ti vteřin, detektor vyhlásí poplach. Toto řešení minimalizuje případy planých poplachů. Detektor má zabudované nouzové tlačítko, které nahradí běžné nouzové tlačítko, v případě, že jej nemůže dotýčná osoba stisknout. Centrála umí rozeznat ze kterého zařízení byl poplach odeslán. Detektor pádu je doporučen všem, u kterých je zvýšené riziko pádů a kteří nemusejí být v té chvíli schopni vyvolat poplach přímým stisknutím tlačítka, ale také pro ty kdo trpí epilepsií nebo ti, kteří trpí vedlejšími účinky některých léků

4 Kouřový nebo plynový detektor



Funguje jako protipožární ochrana, při poplachu pokud se klient nespojí z jakéhokoli důvodu s dispečinkem a poplach neodvolá, může tento na místo vyslat nebo upozornit hasiče, policii apod. Plynový detektor umisťujeme nad možné zdroje úniku plynu (kamna, ohřívače vody), funguje podobně jako kouřový detektor, v případě úniku plynu tento vyhlásí poplach a dispečink může klientovi nebo komukoliv jinému okamžitě volat, že došlo k úniku plynu a tím předejít jak hmotným škodám, tak hlavně

5 Záplavový detektor



Zařízení se volně položí na zem do koupelny nebo kuchyně anebo na jakémkoliv místě, kde chceme zabránit vyplavení. Při úniku vody tato propojí 3 kontakty na záplavovém detektoru a ten vyhlásí poplach, dispečink Vás telefonicky upozorní, že došlo k zaplavení. Je nutné detektor umístit na nejnižším místě, protože kontakty na detektoru jsou ve výšce 2 mm nad zemí



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetíněves

Tel. 267 713 117, fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz, email.: info@medicalalarm.cz

6 Prostorový detektor



Zařízení monitoruje pohyb ve sledovaném prostoru a hlásí dispečinku jak pohyb v prostoru tak i to, že se v prostoru delší dobu nikdo nepohybuje. Zařízení se dá využít jako elektronické zabezpečovací zařízení pro ochranu majetku a tím spojíte dvojí účel za jednu cenu tj. ochranu zdraví a majetku společně

7 Vanové táhlo



chrání a pomáhá klientům při nebezpečí v koupelnách a vanách, jednoduchým zatažením za táhlo, které je umístěno na dosah z vany vyvoláte poplach a spojíte se s dispečinkem

8 Postelový detektor



Zařízení se umístí pod matrace postele a vyhodnocováním tlaku, který vyvíjí ležící člověk upozorňuje dispečinku o tom jak je postel používána (poplach vyhláší na základě naprogramování, že např. v posteli dlouho nikdo není nebo naopak, že tam je někdo moc dlouho)

9 Nouzová tlačítka



Tlačítka, která se dají nosit na ruce, krku nebo připevnit na stěnu, při aktivaci se spojí s centrální jednotkou, přes kterou můžete komunikovat s dispečerem



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

Tísňový set



Zařízení, kde je centrální jednotka PiperFon Connect + a 3 prostorové detektory + 3 nouzová tlačítka. Set je vhodný na kombinaci elektronického zabezpečení vašeho domovu a majetku společně s ochranou Vašeho zdraví

11 GSM telefon GDP 04



Zařízení který v celém rozsahu nahradí pevnou linku. Používá se tam kde klient nemá pevnou linku nebo chce zařízení využívat na více místech, což umožňuje tento mobilní GSM telefon. Je dodáván bez SIM karty, uživatel služby si může zvolit síť, kterou bude používat. GSM telefon současně slouží i jako normální stolní telefon a lze jej také k tomuto účelu používat. Je také dodáván s jednoduše instalovatelnou záložní baterií, která poskytuje mnohem vyšší jistotu zabezpečení pro případ výpadku elektrického proudu.

12 Dávkovač léků



Výrobek oceněný první cenou soutěži GRAND PRIX na veletrhu v Praze 2009 FOR SENIOR

Pomocí tohoto zařízení a správným jeho naprogramováním se Vám nestane, že si zapomenete vzít naordinované léky. Zařízení lze naprogramovat až na měsíc dopředu. V případě, že si určené léky nevezmete, jste akusticky a opticky upozorněni na jejich odebrání a pokud tak neučiníte i po několika upozorněních zařízení vyvolá poplach a upozorní dispečink na tuto skutečnost a ten se s vámi telefonicky spojí a vyzve Vás k odebrání léků



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117, fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz, email.: info@medicalalarm.cz

13 Epileptická podložka,



Zařízení se skládá z podložky , která se umisťuje do postele a je napojena na kapesní minipočítač, ten podle intenzity a frekvence otřesů těla vyhodnocuje zdali se jedná o epileptický záchvat či ne a případně upozorní dispečink a ten zprostředkuje pomoc. Toto zařízení se v současné době testuje.

14 Tresor Master



Zařízení se montuje u vchodových dveří a jsou v něm uschovány náhradní klíče. 4 místný číselný kód zná majitel a v zapečetěné obálce je uložen na centrálním dispečinku. Pokud je vyhlášen u klienta poplach a je vyslána záchranná jednotka (RZP, policie, hasiči), dispečer obálku rozlepí a sdělí záchranářům kód. Tím se urychlí pomoc a předejde se hmotným škodám . Po skončení akce s majitel zvolí jiný kód a opět se uloží na dispečinku

15 GPS TRACKER



Zařízení sloužící jako mobilní telefon s vestavěným GPS přijímačem, pomocí něhož lze lokalizovat ztracenou osobu, nebo osobu potřebující pomoc.



Zařízení na vyhledávání zatoulaných a ztracených zvířat a věcí bez možnosti aktivního volání o pomoc. Pomocí zařízení lze pasivně sledovat pohyb a místo kde se daný objekt nachází



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves

Tel. 267 713 117 , fax: 267 710 493, mobil 602 618 783

www.griffin.cz , email.: info@medicalalarm.cz

S současně s probíhajícím vývojem se sortiment periferních zařízení neustále zdokonaluje a rozšiřuje. O novinkách se můžete informovat na našich webových stránkách WWW.GRIFFIN.CZ. Připojené zákazníky informujeme o novinkách v pravidelných intervalech sami.

Pokud budete mít jakékoliv další dotazy. Kontaktujte naši centrálu na tel. čísle: 267 713 117, 602 618 783



Griffin Medical Alarm a.s., Pod Markétou 87 Hájek, Praha 10 Uhřetěves
Tel. 267 713 117, fax: 267 710 493, mobil 602 618 783
www.griffin.cz, email.: info@medicalalarm.cz